


仕様

型式	102	202	202N	302	302N
外形寸法	幅950mm 奥行550mm 高さ1780mm				
電源	AC100V $\frac{50}{60}$ Hz 12A				
給水湯	PT $\frac{3}{4}$ "30 ℓ /分以上				
純水				ST $\frac{3}{4}$ "30 ℓ /分以上	
排水	PTI $\frac{1}{2}$ "自然排水50 ℓ /分以上				
ヒーター	乾燥用ヒーター内蔵AC100V 600W				
水槽内材質	ステンレスSUS304				
加圧ポンプ	$\frac{1}{2}$ HP 400W				
重量	160kg			175kg	

取付配管図

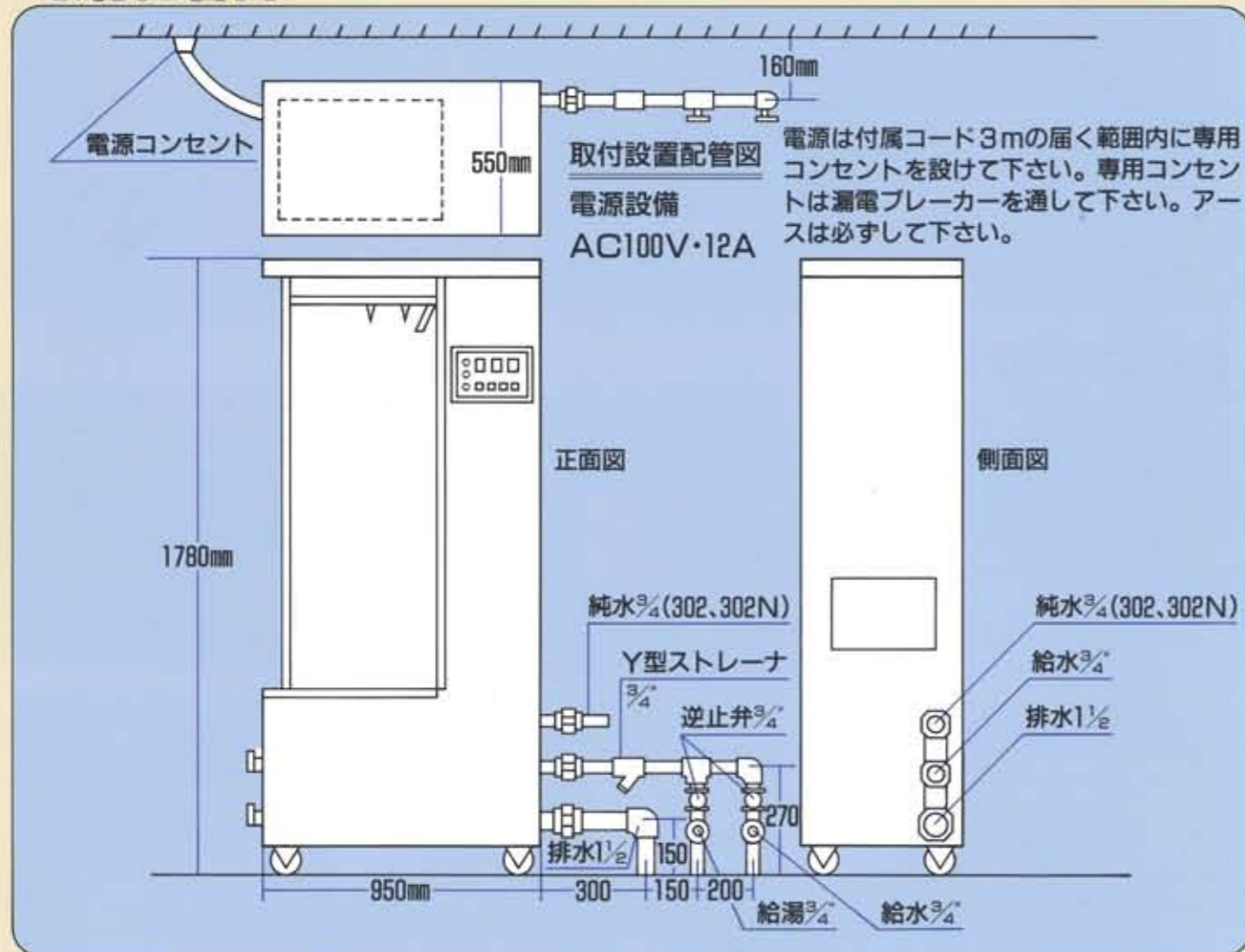

発売元

星盛堂医療器工業株式会社

本社 東京都文京区本郷3丁目24番9号
TEL. 03 (3813) 4711
大阪支店 大阪府中央区平野町1丁目3番9号 丸米ビル
TEL. 06 (6227) 5728

総代理店

JMIC ジェミック株式会社
JAPAN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

本社 東京都中央区日本橋小舟町3-7 セブンスビル
TEL.03(5643)7180 FAX.03(5643)7181
本郷営業所 東京都文京区本郷3-39-15
TEL・FAX.03(3868)3483

本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ジェットウォッシャー

カテーテルを洗浄から乾燥まで
全自動で処理する





HOSHISEMO IRYOKIKOGYO CO., LTD.

Jet Washerの特長

1. 各種チューブ類、針管類、イルリガートル(ゴム管付き)及び、蛇腹管等を、全自動で洗浄から乾燥まで短時間で、最大40本処理出来ます。
2. 小物器具類や、マスク等の乾燥用にも御使用いただけます。
3. 各ノズル毎に専用バルブがついておりますので、多少にかかわらず洗浄乾燥が出来、しかもアダプターは簡単に交換出来ます。
4. 洗浄工程を必要に応じ、任意にセット出来ます。

アタッチメント

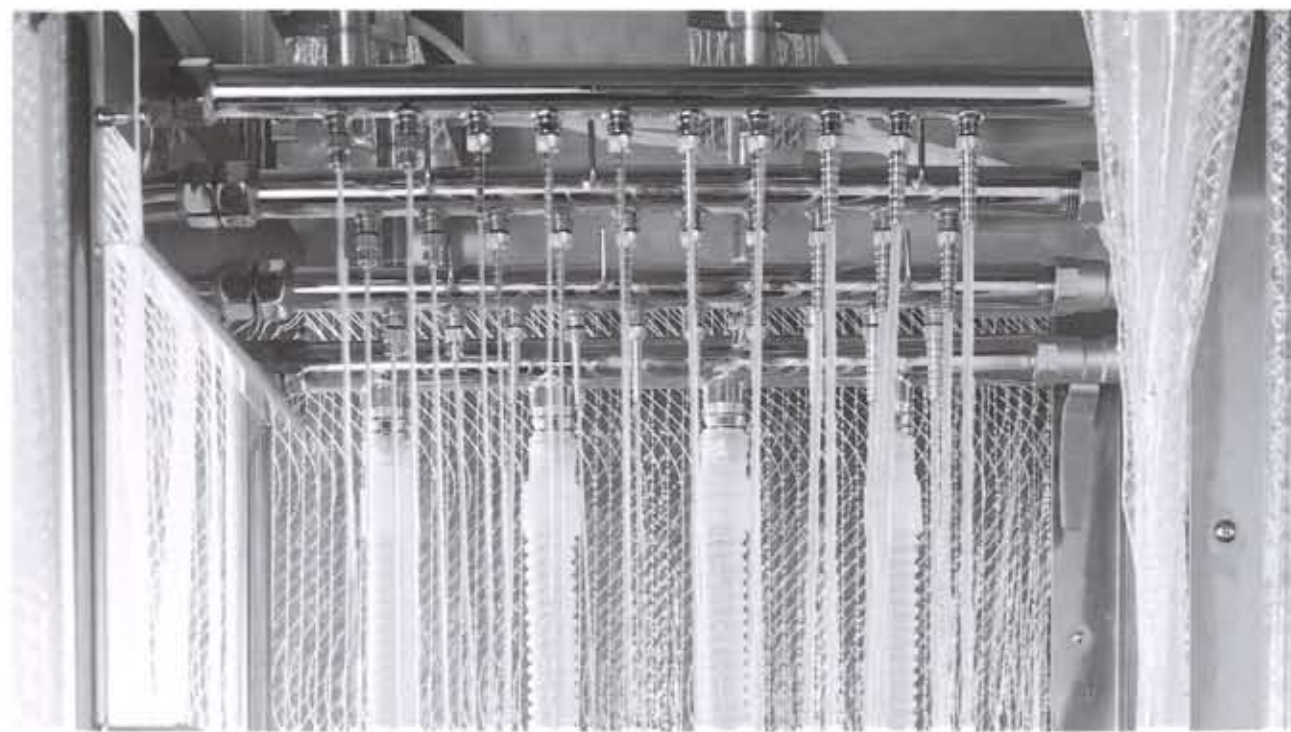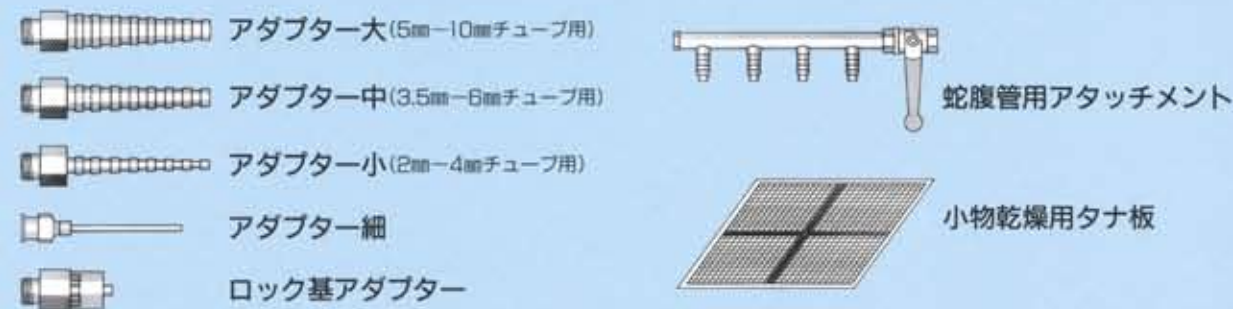


内部洗浄部




外部洗浄部 (202N、302Nタイプのみ)

機種別洗浄工程

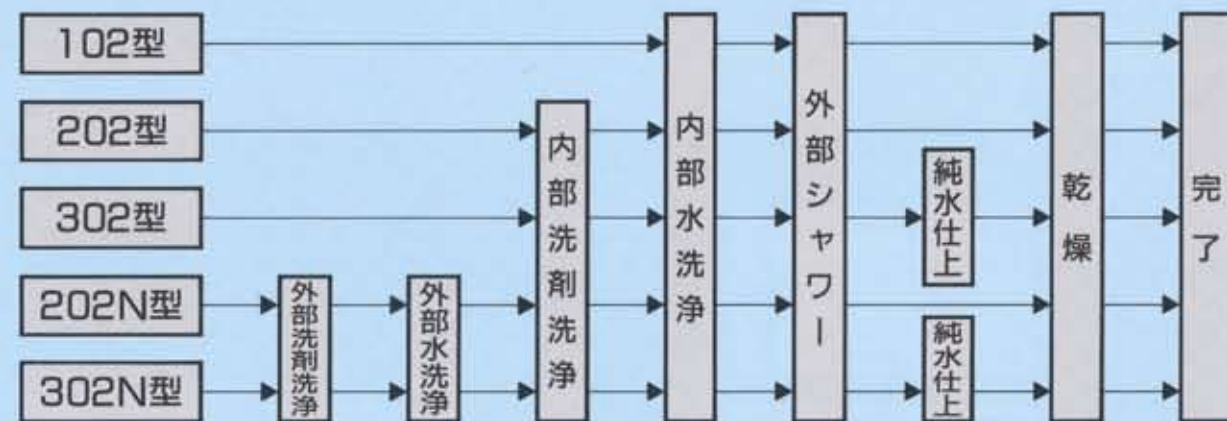

機種別操作パネル

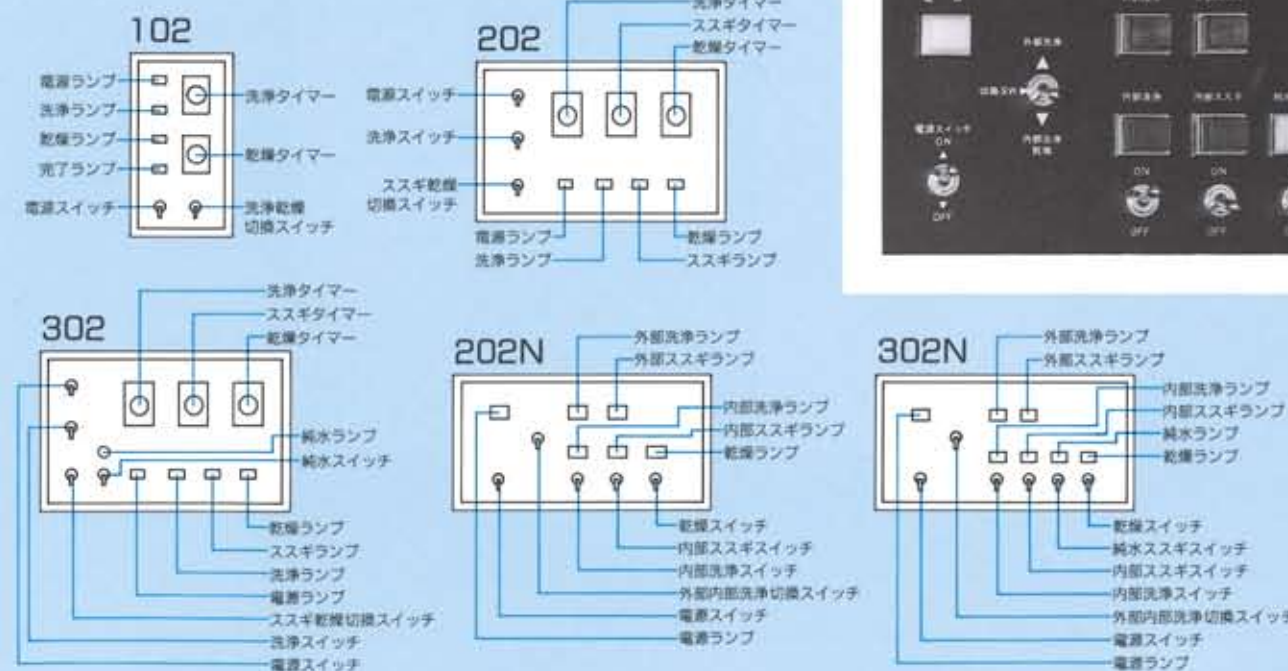

所要時間(参考例)

- カテーテル類.....洗浄時間10分-15分、乾燥時間15分-25分
- 蛇腹管.....洗浄時間30分-40分、乾燥時間50分-60分